

Подъемники для пациентов: Обеспечение безопасности пациента и специалиста по уходу

Подъемники Хойера

Подъемники Хойера позволяют поднимать и транспортировать человека с применением минимальных физических усилий. Прежде чем поднимать пациента потренируйтесь. Для этого используйте помощника, а не реального пациента. Эти общие меры предосторожности помогут обезопасить Вас и Вашего пациента.

Советы по обеспечению безопасности специалиста по уходу за больными:

- Подъемник поможет избежать травм спины при поднятии пациента с пола, его транспортировке и перемещении.
- Используйте его как можно ближе к пациенту, чтобы избежать излишнего нагружения при наклоне.
- Подходит ли слинг Вашему пациенту по размеру? Удовлетворительно ли состояние слинга?
 - ✓ Если слинг велик, пациент может выскользнуть. Если слинг мал, его применение может ухудшить состояние пациента.
 - ✓ Не следует использовать слинг, если аккумулятор не заряжен, или если видны признаки износа слинга, дыры или потертые швы

Проверка физических возможностей и состояния пациента:

- Может ли пациент помогать Вам во время транспортировки?
- Перед использованием подъемника необходимо взвесить пациента и проверить его физическое состояние.
- Пациент в состоянии понимать и следовать инструкциям?
 - ✓ Не используйте подъемник, если пациент взволнован, сопротивляется или настроен агрессивно.
- Пациент готов к использованию подъемника?

Подготовка окружения:

- Сколько необходимо специалистов по уходу для использования подъемника?
- Отрегулируйте положение подъемника и поверхности, на которую будет перемещен пациент
 - ✓ Пододвиньте ножки основания подъемника к пациенту
 - ✓ Отрегулируйте высоту подъемника и поверхности, на которую будет перемещен пациент
- Очистите путь перемещения подъемника
 - ✓ Достаточно ли места для беспрепятственного перемещения и вращения подъемника?
 - ✓ Можно ли расположить подъемник под или вблизи поверхности, на которую перемещается пациент, и пройдет ли он через дверные проемы?

Безопасное размещение пациента в слинге:

- Центр слинга должен находиться под позвоночником пациента.
 - ✓ Распрямлены ли ремни для ног? Нет ли складок под пациентом?
- Присоедините ремни слинга к балке.
 - ✓ Для обеспечения равновесия проверьте, задействованы ли петли со всех сторон.
 - ✓ Убедитесь, что все зажимы или петли надежно закреплены, а ремни не перекручены.
 - ✓ Поддерживается ли голова и спина пациента?

Подъем пациента:


- Не оставляйте пациента без присмотра во время Вашего отсутствия. Не допускайте нахождение пациента в подвешенном состоянии в течение долгого времени (не более нескольких минут)
- Чтобы убедиться, что пациент надежно закреплен, поднимите его на высоту 2 дюймов от поверхности.
 - ✓ Надежно ли закреплены ремни slingа?
 - ✓ Вес пациента распределен между ремнями равномерно?
- Удобно ли пациенту?
 - ✓ Убедитесь, что sling не защипывает и не стягивает кожу
 - ✓ Следите, не проявляет ли пациент невербальные признаки дискомфорта
- Поднимайте пациента медленно и только на такую высоту, которая необходима для выполнения перемещения

Снижение пациента:

- Не удерживайте и не поддерживайте вес пациента, пока он находится в slingе, поскольку это может привести к отсоединению ремней или крючков
- Медленно опустите пациента на поверхность, на которую его необходимо переместить, и прежде, чем ослабить ремни, переведите тело пациента в правильное положение
- Осторожно снимите sling с пациента
 - ✓ Избегайте травмирования кожи пациента

Другие советы по безопасности:

- Не подпускайте к подъемнику детей и домашних животных
- Убедитесь в том, что Вы распознаете и понимаете значения любых сигналов тревоги и сообщений об ошибках
- В случае появления сигнала тревоги, обязательно проверьте подъемник
- Сообщайте своему руководителю, если Вам нужна помощь или возникают проблемы с подъемом пациента
- Если sling изношен или порван, не используйте его. Немедленно сообщите об этом своему руководителю.
- Для очистки подъемника:
 - ✓ Выполняйте дезинфекцию всех поверхностей подъемника и slingа после каждого использования
 - ✓ Следуйте инструкциям производителя по стирке

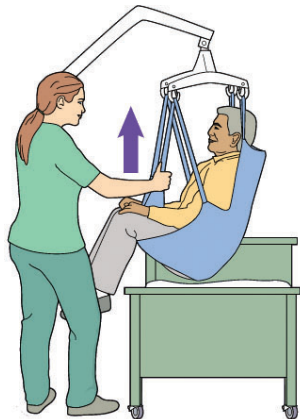

* Данное руководство составлено по материалам Федерального управления США по лекарственным средствам и компании Kwikpoint

Больше информации на веб-сайте www.archcare.org



ArchCare - это система медицинского обслуживания митрополии Нью-Йорка.